

**ORTOSERVIS**  
s námi zůstanete v pohybu

**KiDS**

**VÝBĚR  
DĚTSKÉHO  
SORTIMENTU**



**KATALOG 2023 VÝBĚR**



**.bock**



**panthera**

**DIETZ**  
REHA-PRODUKTE

**DIETZ**  
POWER

[www.ortoservis.cz](http://www.ortoservis.cz)





# DOVOLTE, ABYCHOM SE PŘEDSTAVILI A NABÍDLI VÁM NAŠE ZBOŽÍ ...

## Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

V roce 2019 vstoupil v platnost nový Zákon o veřejném zdravotním pojištění, který přinesl mnoho změn v předepisování a úhradách zdravotnických prostředků. V rámci těchto změn došlo k rozšíření možností předepisování vybraných zdravotnických prostředků praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost (PED). Nově můžete vystavovat poukazy na širší sortiment těchto pomůcek a u řady z nich není nutné následné schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Dovolujeme si Vám zaslat výběr z katalogu námi dodávaného sortimentu zaměřený na zdravotnické prostředky a pomůcky pro děti. Převážná většina zdravotnických prostředků je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nemalou část tohoto sortimentu však nemůžete, jako pediatr, předepsat. Může ji však předepsat lékař jiné odbornosti. Pokud je pomůcka v principu hrazená zdravotními pojišťovnami, jsou zde uvedeny zkratky odborností lékařů, kteří mohou danou položku předepsat a také zda poukaz (žádanka) podléhá schválení revizním lékařem. S vystaveným (případně schváleným) poukazem pak může rodič navštívit některou z našich prodejen, kde si pomůcku vyzvedne, nebo nám může poukaz zaslat a my mu obratem pomůcku zašleme, nebo osobně dovezeme. S poukazem se může také obrátit na kteroukoliv prodejnu zdravotnických potřeb, která si danou pomůcku objedná a pacient si ji zde bude moci, obvykle do tří dnů, vyzvednout. Vybranou pomůcku si může pacient samozřejmě také koupit za hotové. Pokud si při volbě vhodné pomůcky, nebo postupu jejího předepsání, nebudete vědět rady, rádi Vám poradíme, telefonicky nebo emailem. Obracet se můžete na kteroukoliv naši pobočku.

Ortoservis s.r.o.

## Jak má vypadat vyplněný poukaz na zdravotnický prostředek.

Na poukaz lze předepsat pouze pomůcku zařazenou v úhradovém katalogu (ať již vydaném VZP, Oborovými zdravotními pojišťovnami nebo SUKLeM). Na jeden poukaz lze uvést pouze jednu položku (jeden kód). Jak vypadá vyplněný poukaz například na nástavec na WC a jaké jsou jeho nezbytné náležitosti je uvedeno níže.

Kód zdravotní pojišťovny      Rodné číslo pacienta      Kód zdravotnického prostředku      Výše úhrady od zdravotní pojišťovny

Kód pojišťovny 1,23	<b>POUKAZ NA LÉČEBNOU ORTOPEDICKOU POMŮCKU</b>		Ev. č.
Příjmení a jméno Jan Novák	DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY oprava – úprava pomůcky		Pomůcka nová / reparaovaná*) *)nehodící se škrtněte!
Číslo pojištění 4208011001	Sk      Kód      Počet      Cena		
Bydliště (adresa) Klikatá 3/210 180 00 Praha 8	50104832      1 ks      945,00		
<input type="checkbox"/> majetek pojišťovny      Dg. 6248	Nástavec na WC Mopedia 10 cm		Cena pomůcky
<input type="checkbox"/> majetek pacienta      Pomůcka trvalá / doživotní*) *)nehodící se škrtněte!	Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny		Datum:
<input type="checkbox"/> hraří pacient      Pomůcka dočasná na počet měsíců			
Dne: 10.5.2020	Razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře		Razítko výdejce

Razítko a podpis lékaře

Datum kdy lékař vystavil poukaz

Cena zdravotnického prostředku. Pokud je vyšší než úhrada, pak tento rozdíl je doplatek pacienta

Sortiment zdravotnických prostředků dodávaných naší společností obsahuje více než 550 položek. Od berlí přes zvedáky, mechanické a elektrické vozíky až po lůžka a pomůcky k překonávání bariér. Spolupracujeme se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR a řadu těchto zdravotnických prostředků dodáváme také jako vybavení zdravotnických zařízení. Díky naší již téměř třicetileté zkušenosti jsme schopni nalézt optimální řešení životních situací pro většinu tělesně postižených, dětí, dospělých i seniorů z titulu jejich handicapu nebo tělesného omezení.

Na přání Vám rádi zašleme katalog našeho kompletního sortimentu.

## Vysvětlivky označení:



plně hrazeno zdravotními pojišťovnami



nehrazeno zdr. pojišťovnami



částečně hrazeno zdravotními pojišťovnami (hrazeno s doplatkem uživatele)



poukaz musí schvalovat revizní lékař ZP

Pokud je pomůcka hrazená zdravotními pojišťovnami, je u jejího názvu uveden „Kód ZP“, jsou zde uvedeny také zkratky odborností lékařů, kteří mohou konkrétní pomůcku předepsat.

**DIA** diabetolog  
**GER** geriatr  
**CHI** chirurg  
**INT** internista  
**NEU** neurolog

**ORP** ortopedický protetik  
**ORT** ortoped  
**PED** dětský praktický lékař  
**PRL** praktický lékař  
**REH** rehabilitační lékař

**REV** revmatolog  
**TRA** traumatolog  
**SLO** sestra v lékařských oborech

Ceny uvedené ceníku, který naleznete na předposlední straně tohoto katalogu, jsou platné pouze v případě, že jsou shodné s cenami v aktuálně platném vydání Úhradového katalogu. Pokud se tyto ceny liší, jsou platné ceny uvedené v aktuálním vydání Úhradového katalogu. Společnost Ortoservis s.r.o., Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8 je zapsána v OR u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72014, IČO 26121760.



Jsou určeny pro děti s výrazně sníženou pohyblivostí dolních končetin, současně však musí mít v dostatečné míře zachovanou schopnost pohybovat se na vozíku silou svých rukou. Tato podmínka nemusí být naplněna u speciálních polohovacích vozíků. Typ vozíku je nutno zvolit v závislosti na tělesných proporcích a charakteru postižení budoucího uživatele a s ohledem na podmínky, v nichž bude vozík provozován. Je samozřejmě potřeba brát v úvahu také perspektivu použití vozíku s ohledem na růst dítěte.

Pediatři nemohou vozíky předepisovat a je potřeba se obrátit na odborného ošetřujícího lékaře uvedené odbornosti. Pokud si nejste jisti vhodností vozíku nebo jeho parametry předejte nám kontakt na Vašeho pacienta. Naši technici vozík zdarma předvedou u Vašeho pacienta doma, ověří, zda bude vozík vyhovovat a vozík zaměří. Následně předáme rodičům přesné podklady pro předepsání vozíku.

## panthera MICRO 3


nehrazeno



Pro každé dítě v procesu jeho dospívání je k rozvoji myšlení nezbytné, aby se v určitém věku začalo samo pohybovat a mohlo tak naplnit svou přirozenou potřebu poznávat. Dítěti, které se narodí s postižením dolních končetin, musí být k jeho duševnímu rozvoji proto umožněn samostatný pohyb ihned, jakmile o to projeví zájem. Proto PANTHERA vyvinula vozík pro velmi malé uživatele. Je určen pro děti do cca 3 let. Dolní věková hranice je pak dána schopností samostatného sedu dítěte a není výjimkou, že je vozík používán již dětmi od 10 měsíců věku.

Vozík má váhu pouze 3,5 kg a jeho valivý odpor a tedy síla potřebná k jeho pohánění je minimální. Za tímto účelem byly na vozíku použity nejlehčí materiály a komponenty. Vozík je dodáván ve dvou základních velikostech sedačky. Zadní kola o průměru 18" nebo 20" mají rychloupínací osy, sportovní ráfky a vysokotlakové pláště. Zadní kola nemají poháněcí obruče vzhledem k specifickému úchopu kol u malých dětí a s ohledem na jejich bezpečnost (malé dítě by si mohlo poranit prsty). Přední kolečko je pouze jedno, čímž je dosaženo velmi nízkého valivého odporu a zároveň velmi snadného zatáčení. Zadní osa kol je titanová, plynule nastavitelná, titanová je také rolnička proti převrácení. V základním provedení je vozík vybaven dvoubodovým bezpečnostním pásem a výškově stavitelnou deskovou stupačkou.

Doplňky, příslušenství a volitelné prvky vozíku naleznete v objednacím listě, který je k dispozici na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám požádat nás o předvedení tohoto vozíku. Jednak je to vhodné z hlediska jeho správného zaměření a možná budete překvapeni, jak dokáže vidina svobody pohybu prospět i tam, kde to možná nečekáte.

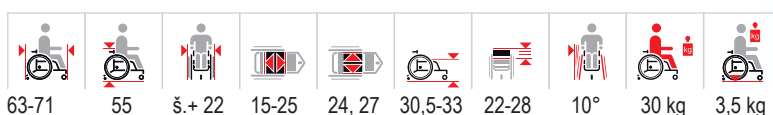





## panthera BAMBINO 3

kód ZP 5014134

částečně hrazeno



NEU

ORT


REH



Velmi lehký mechanický vozík s pevným rámem vhodný pro děti ve věku 3-12 let. Vozík Bambino má rám z chrom-molybdenové oceli a titanové poháněcí obruče. V základním provedení je dodáván s 20", 22" nebo 24" rychloupínacími zadními koly s vysokotlakým pláštěm a s polotvrdými předními koly o průměru 120 mm. Stupačka je desková, výškově i úhlově stavitelná. Zádová opěrka je polstrovaná s možností nastavení její tuhosti i tvaru. Sklon zádové opěrky je možno nastavit plynule. Spolu s možností plynule nastavit polohy osy zadních kol lze uzpůsobit vozík zcela na míru uživateli včetně optimalizace těžiště vozíku.

Nastavit je možno také tuhost (prověšení) sedačky vozíku a lýtkového pásu. Osy zadních kol mají odklon 6°, při objednání vozíku je však možno zvolit osy zadních kol s jiným odklonem. Nosnost vozíku je 60 kg.

Chceme naplňovat motto firmy PANTHERA, které říká, že: „Dobrý vozík je vozík nejen dobře vyrobený, ale i dobře seřízený“. Nabízíme Vám proto, abyste nás se svým dítětem před rozhodnutím o pořízení vozíku navštívili a vozík si vyzkoušeli. Seřídíme jej „na míru“ pro Vaše dítě, s ohledem na jeho proporce i „vozičkářskou zručnost“. Teprve tak bude moci ocenit skvělé parametry těchto vozíků. Pokud nás nemůžete navštívit, rádi Vám, po dohodě, přivezeme vozík předvést a vyzkoušet zdarma do místa Vašeho pobytu. Poradíme Vám samozřejmě i při volbě optimální skladby vozíku pro Vaše dítě.

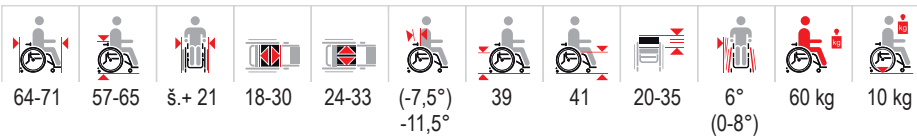





## panthera S3 Short Low

kód ZP 5004702


částečné hrazeno



Vozík s pevným rámem a velmi nízkou celkovou hmotností 8,2 kg. Vhodnost vozíku je dána šířkou sedla od 33 do 39 cm a hloubkou sedla 27 až 35 cm a lze ji odhadnout na 8 až 15 let, případně i pro dospělé osoby menšího vzrůstu.

Vozík má rám z chrom-molybdenové oceli o tloušťce stěny 0,6 mm, karbonovou osu zadních kol a titanovou výškově stavitelnou stupačku a poháněcí obruče. V základním provedení je dodáván s 22" nebo 24" rychloupínacími zadními koly s vysokotlakým pláštěm a předními polotvrdými koly 90 nebo 120 mm. Zádová opěrka je polstrovaná s možností nastavit tuhost i tvar. Sklon zádové opěrky je možno nastavit plynule. Spolu s možností plynule nastavit polohu osy zadních kol lze uzpůsobit vozík zcela na míru uživateli včetně optimalizace těžiště vozíku. Vozík má nastavený sklon sedačky 7°, čímž je docíleno lepšího postavení pánve a stability sedu. Nastavit je možno také tuhost (prověšení) sedačky vozíku a lýtkového pásu. Osy zadních kol mají odklon 2,2°, při objednání vozíku je však možno zvolit osy zadních kol s vyšším či nulovým odklonem. Při zvýšeném odklonu zadních kol dochází k zvýšení celkové šířky vozíku a tím může dojít ke zhoršení průjezdu dveřmi či zúženým prostorem. Nosnost vozíku ve verzi pro děti je 100 kg.

Kontaktujte nás, rádi Vám vozík přivezeme zdarma předvést, vyzkoušet a zaměřit. Zapracujeme také návrh vozíku pro jeho předepsání odborným ošetřujícím lékařem.

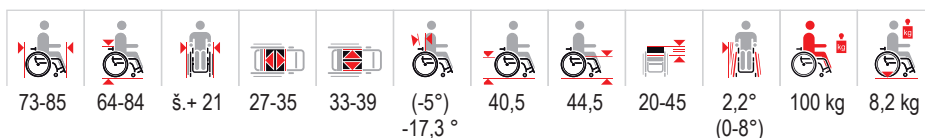


## SWINGBO 2

nehrazeno



Dětský mechanický vozík pro uživatele se specifickými potřebami, kteří vyžadují polohování při celodenním sezení ve vozíku. V základním provedení je vybaven ergonomicky tvarovaným antidekubitním sedákem GEMINI a zádovou opěrkou s 3D potahem. Vozík lze však uzpůsobit i jiným sedacím systémům, např. sedacímu systému Varillite či sedákům a opěrkám Stabulo, je vhodný i pro aplikaci sedacích ortéz. V základu jsou součástí sedacího systému plechy sedáku a zádové opěrky. Vozík Swingbo 2 je velmi kompaktní a díky rámu z hliníkové slitiny má i nízkou hmotnost. Pro přepravu či skladování lze sklopit zádovou opěrku, případně odejmout zadní kola. Rám vozíku umožňuje změnu těžiště vozíku.

Šířka sedla je volitelná od 24 do 36 cm (po 2 cm) a každá šířka sedla umožňuje nastavení hloubky sedla v adekvátním rozsahu. Výška zádové opěrky je též nastavitelná a lze volit mezi mírným a hlubším prohnutím zádové opěrky. V základním provedení vozíku je dále výškově nastavitelná hlavová opěrka s 3D polstrem, výškově nastavitelné loketní opěrky, polohovatelná stupačka na jednodílné konzoly. Lze též volit mezi dělenými tlačnými madly a jednodílným tlačným madlem. Vozík poskytuje polohování zádové opěrky v rozsahu 80° - 120° a náklon sedla (při zachování úhlu sedla) v rozsahu -5° - 45°. Stupačka je též polohovatelná, a to v rozsahu 85° - 160°. Polohování je mechanické pomocí táhel s nastavením v několika krocích. Zadní kola vozíku mají standardně rozměr 22" a lze je doplnit bubnovými brzdami ovládanými doprovodnou osobou na zadním tlačném madle. Přední kola vozíku jsou plná o velikosti 100x32 mm, lze však zvolit i jiné alternativy. Maximální nosnost vozíku Swingbo 2 je 50 kg.

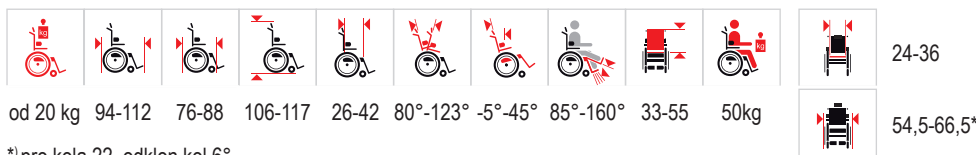

\*) pro kola 22, odklon kol 6°







# MECHANICKÉ VOZÍKY

## SHERPA

nehrazeno



Speciální mechanický vozík s rozsáhlou možností nastavení a polohování. Je určen pro dospívající a dospělé uživatele se specifickými potřebami a se zvýšenými požadavky na stabilizaci sedu a polohování. Sedačka je polohovatelná při zachování úhlu sedu (poloha relax) v rozsahu  $-7^{\circ}$  -  $45^{\circ}$ . Zádovou opěrku lze polohovat samostatně v rozsahu  $80^{\circ}$  -  $123^{\circ}$ . Polohovatelná je též jednoduchá konzole stupačky, a to v rozsahu  $85^{\circ}$  -  $160^{\circ}$ , ta je opatřena jednoduchou nášlapnou plochou s opatrní zábranou. V rámci příslušenství lze podobu stupačky přizpůsobit potřebám uživatele. Zadní kola o velikosti 24" jsou vzdušnicová, opatřena bubnovými brzdami (brzdy pro doprovodnou osobu vyvedené na tlačná madla) a s nulovým odklonem kol. Vozík lze dodat i s odklonem kol  $3^{\circ}$  nebo se zadními koly 12" nebo 16". Přední kola jsou standardně dodávána vzdušnicová ve velikosti 190 x 50 cm.

Hliníkový rám vozíku je doplněn profily pro snadné upevnění možných příslušenství a lze jej objednat v široké škále barevností. V základním provedení je vozík vybaven antidekubitním sedákem GEMINI Spin a polstrovanou zádovou opěrkou z prodyšné 3D textilie. Standardní sedací systém lze nahradit antidekubitním systémem od firmy Varilite nebo individuálně zhotovenou sedací ortézou. S volbou optimálního sedacího systému Vám rádi pomůžeme.



																36-48
20,6 kg	90-122	68-97	96-125	29-54	$80^{\circ}$ - $123^{\circ}$	$-7^{\circ}$ - $45^{\circ}$	$85^{\circ}$ - $160^{\circ}$	47-61	134 kg							54-73





Elektrické vozíky jsou vhodné pro děti, které nemají sílu ovládat mechanický vozík nebo jej dokáží ovládat pouze omezený čas nebo v určitém prostředí. U dětí musí být zachována základní mentální schopnost vozík řídit stejně tak jako schopnost porozumět a uposlechnout příkaz rodičů tak, aby byl vozík pro dítě bezpečný. Vozíky dodáváme dětem již od jednoho roku věku. V naší nabídce máme i modely, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Ochota schválit úhradu elektrického vozíku pro děti, však není napříč všemi zdravotními pojišťovnami příliš velká.

Elektrické vozíky jsou velmi komplexní produkty s širokou škálou možností přizpůsobení, příslušenství, systémů ovládání s možností napojení na moderní technologie atp. Jako jedna z mála firem provádíme také individuální úpravy vozíků a sedacích systémů na míru svým malým uživatelům.

## SANGO\_M SLIMLINE JUNIOR

kód ZP 5004437

částečně hrazeno



NEU

ORT

REH




Dětský elektrický vozík od holandského výrobce firmy Dietz Power vhodný pro děti již od 6 let s výškou vzrůstu minimálně 110 cm.

Vozík má podvozek se středovým pohonem v provedení Slimline, tedy s maximální šíří 53 cm. Protože je zadní kolo vozíku jen jedno vyžaduje na otáčení jen velmi málo prostoru a díky své kompaktnosti se s ním děti rychle sžijí.

Sedací systém vozíku Sego Junior nabízí volbu dvou základních šířek sedu 32 a 37 cm. Protože jsou postranice vozíku nejen odnímatelné, ale také všestranně nastavitelné, lze jimi vymezit šířku sedu, za pomoci dodatečného příslušenství v rozsahu 25 – 37 cm. Hloubka sedu vozíku může mít hodnotu 30, 35 nebo 40 cm. Stejně je možno volit výšku sedačky od země, šířku i výšku anatomické zádové opěrky.

**TECHNICKÉ PARAMETRY:** Nosnost vozíku je 65 kg. Rychlost jízdy lze volit při objednání v rozsahu 0 až 6 km/h (při objednání je vždy potřeba dobře posoudit schopnosti dítěte. Doporučujeme maximální rychlost vozíku nejprve omezit). Vozík je osazen bateriemi o kapacitě 2 x 60 Ah, které poskytují vozíku v běžném terénu dojezd 20-35 km na jedno nabití.

Nad rámec základního provedení je možné vozík vybavit polohovacími funkcemi sedacího systému, a to elektrickou zvedací sedačkou, elektrickou polohou relax a mechanicky či elektricky polohovatelnou zádovou opěrkou a stupačkami. Vozík lze dále doplnit širokým sortimentem příslušenství i všemi dostupnými speciálními systémy řízení. Protože se jedná o dětský vozík, je dobré jej dále přizpůsobit na řadu běžných činností dítěte (hraní, učení, příjem potravy), a v neposlední řadě jej barevně přizpůsobit jeho přání. Informace o možném příslušenství naleznete v objednacím listu, který je k dispozici na našich internetových stránkách, kde je možno požádat také o bezplatné předvedení a zaměření vozíku.

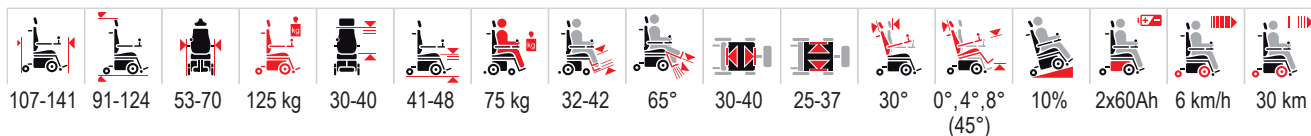

## SANGO\_F SLIMLINE JUNIOR

kód ZP 5004437

částečně hrazeno



NEU

ORT


REH



Dětský elektrický vozík s pohonem předních kol, který má díky podvozku v provedení Slimline celkovou šířku pouze 53cm. Díky kompaktnímu podvozku je manipulace s vozíkem a jeho ovládání snadné i na malém prostoru v interiéru. Velká hnací kola vpředu pak zajišťují komfortní jízdu ve venkovním terénu.

Vozík je vybaven sedacím systémem Sego Junior, který je navržen speciálně pro potřeby dětských uživatelů. Je možné volit ze dvou základních šířek sedu 32 nebo 37 cm, díky dalšímu příslušenství však lze šířku sedu upravovat v rozsahu 25 - 37 cm a přizpůsobit tak sedací systém na míru Vašeho dítěte. Příslušenství k tomuto vozíku je celá řada a jeho kompletní nabídku naleznete v objednacím listě na našich webových stránkách. Mimo jiné lze vozík vybavit polohovacími funkcemi sedacího systému.

**TECHNICKÉ PARAMETRY:** Nosnost vozíku je 75 kg. Rychlost jízdy lze volit při objednání v rozsahu 0 až 6 km/h s ohledem na schopnosti dítěte (doporučujeme maximální rychlost vozíku nejprve omezit, aby se dítě s vozíkem nejprve sžilo). Vozík je osazen bateriemi o kapacitě 2 x 60 Ah, které poskytují vozíku v běžném terénu dojezd 20-35 km na jedno nabití. Výrobce tohoto vozíku je firma Dietz Power z Holandska.

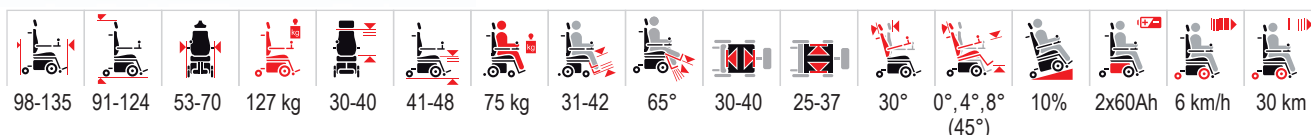





## EXPLORER MINI


nehrazeno



Schopnost malého dítěte prozkoumat své prostředí je základním předpokladem pro vývoj kognitivních, sociálních, emocionálních a prostorových dovedností, které současně umožňují dítěti další rozvoj jeho schopností a osobnosti. Pokud je typická posloupnost vývoje změněna/narušena, schopnost malého dítěte měnit své prostředí, prozkoumávat okolí, ovládat předměty, které chtějí, je zastavena. Společnost Permobil proto přišla na trh s pomůckou, která již v útlém věku umožňuje dětem samostatný pohyb a tím rozvoj jejich dovedností.

Explorer Mini je schválenou pomůckou, která dětem s poruchami hybnosti ve věku od 12 do 36 měsíců umožňuje samostatný pohyb a raný vývoj. Jedná se o ergonomické zařízení s několika opěrnými plochami, které pomáhají podporovat stabilní vzpřímené držení těla a zároveň poskytují příležitost ke zlepšení svalové síly a vytrvalosti.

Používání této pomůcky dětmi má svá výrazná specifika. Je potřeba nejprve ponechat čas dítěti k seznámení s novým objektem v jeho okolí a následně také na samostatné objevení možností, které mu tato pomůcka nabízí. Seznámíme Vás s výsledky studií, z kterých vyplývají jak výrazné přínosy pro rozvoj dítěte, tak doporučené postupy v prvních dnech používání.

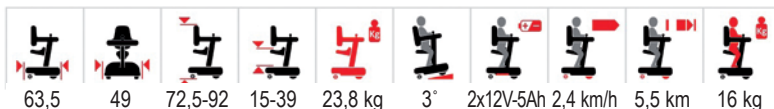









# ZDRAVOTNÍ KOČÁRKY

Zdravotní kočárky jsou sice určeny zejména pro postižené děti, ale vzhledem k velikostem a nosnosti až 75 kg mohou být použitelné i pro dospělé osoby malého vzrůstu. Široká škála doplňků a koncepce zdravotních kočárků umožňuje sestavit kočárek dle konkrétního postižení dítěte a díky své variabilitě umožňuje do jisté míry růst kočárku spolu s dítětem. Pokud je to možné doporučujeme vždy podpořit aktivitu dítěte a zvolit mechanický nebo elektrický vozík před kočárkem.

## ZDRAVOTNÍ KOČÁREK TOM 4 – Mini, Standard, Maxi

kód ZP 5003230

plně hrazeno



## ZDRAVOTNÍ KOČÁREK TOM 4 – SM42

kód ZP 5003232

částečně hrazeno



NEU

ORT

REH

Dětský kočárek TOM 4 je dodáván ve čtyřech provedeních podle velikosti dítěte. Kočárek je vyroben z odlehčených tenkostěnných profilů s povrchovou úpravou epoxidovým práškovým lakem a ve všech provedeních je vybaven odpruženým podvozkem. Vyšší torzní tuhost tohoto podvozku spolu s použitím velkého průměru kol zajišťuje dobrou průjezdnost v terénu. Podvozek je plně skládací, sedačka je odnímatelná, otočná, s odnímatelným potahem a měkkou výplní. Snadná manipulace je zajištěna tím, že kočárek lze zcela složit včetně připevněné sedačky. Kočárek TOM 4 je vyráběn ve velikosti MINI, STANDARD, MAXI a Supermaxi 42. Technické specifikace jednotlivých typů naleznete v tabulce.

V základním provedení je kočárek vybaven polohovatelným vodítkem a odnímatelnou a otočnou sedačkou s plynule nastavitelným náklonem. Opěrka zad je výškově nastavitelná a také plynule sklápěná. Kočárek má nastavitelnou hloubku sedáku. Hloubce sedáku lze přizpůsobit nastavení pozice podnožky. Podnožka je úhlově a výškově nastavitelná. Přední kolečka mohou být pevná o průměru 300 mm nebo otočná o průměru 200 mm. Zadní kolečka mají průměr 300 mm. Kočárek je dále vybaven odnímatelnými bočními vymešovacími polštářky a odnímatelnou hrazdičkou.

Ke zdravotním kočárkům TOM 4 dodáváme přes dvacet různých doplňků a příslušenství. Jedná se například o hlavovou a krční opěrku, podpažní opěrky, dvou a čtyř bodový pás a nožní pás. Dále ke kočárku TOM 4 nabízíme kyčelní opěrku, mezinožní klín, fixační vestu, kalhotky a fixaci ramen a hrudníku, zimní i letní nánožník, pokojový podstavec pro kočárek, pracovní desku, boční chrániče rámu atd. Většina doplňků je hrazena zdravotními pojišťovnami s minimálním doplatkem. Kompletní nabídku doplňků najdete na našich internetových stránkách.

Kočárek TOM 4 ve velikostech MINI, STANDARD a MAXI je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Při jeho objednání je nutno uvést velikost kočárku a typ koleček, které požadujete. S volbou doplňků a příslušenství Vám rádi poradíme, ať již telefonicky nebo při Vaší osobní návštěvě na některém z našich středisek. Objednací kód i cena jsou pro velikosti MINI, STANDARD i MAXI stejné. Velikost Supermaxi 42 (SM42) má samostatný kód a je z velké části hrazen pojišťovnami.



<b>MINI</b>	101	17 kg	35 kg	62	27-31	26-30	99	45-60	-/+ 27°	14-28	0°-175°	93	62	55
<b>STANDARD</b>	101	18 kg	35 kg	62	27-31	24-34	99	52-68	-/+ 27°	20-35	0°-175°	93	62	55
<b>MAXI</b>	103	20 kg	50 kg	66,5	32-43	28-38	107	57-68	-/+ 25°	24-40	0°-165°	96	65,5	63
<b>MAXI 42</b>	103	24 kg	75 kg	68	32-43	42,5	110	57-68	-/+ 25°	24-40	0°-165°	96	68	66

## FLEXI POLŠTÁŘKY

kód ZP 5004427

částečně hrazeno



NEU

ORT

REH

Jako velmi užitečné příslušenství pro rostoucí dítě Vám můžeme nabídnout FLEXI sadu, což je praktická sada bočních vymešovacích polštářků umožňující flexibilně upravovat šíři sedačky. Pomocí 6 polštářků lze sedačku zúžit až o 100 mm. Polštářky mají také různou šíři a tvrdost, jejich kombinací pak lze zajistit prakticky libovolnou šíři sedačky.



## ZDRAVOTNÍ KOČÁREK BEN 4 PLUS

kód ZP

5003236

částečně hrazeno



Základem konstrukce zdravotního kočárku Ben je robustní, odpružený podvozek s velkými koly o průměru 300 mm s terénním vzorkem. Kočárek má plně složitelný podvozek vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů. Kočárek je dodáván ve velikostech Mini až SuperMaxi 45. Ve velikosti SuperMaxi 45 se jedná o největší kočárek dostupný v ČR. Nosnost kočárku Ben v provedení SuperMaxi 45 je 75 kg. Pevná konstrukce sedačky kočárku má odnímatelný potah s měkkou výplní a umožňuje ve velké míře využití různých speciálních fixačních doplňků a příslušenství. V základním provedení je kočárek vybaven plynule sklopnou opěrkou zad, nastavitelným náklonem sedačky, odnímatelnou hrazdičkou a anatomickým madlem. Z volitelného příslušenství je možno kočárek doplnit například opěrkou hlavy, mezinožním klínem, dvoubodovým nebo čtyřbodovým bezpečnostním pásem, stříškou nebo pláštěnkou. Aktuální varianty barevného provedení potahů najdete na našich internetových stránkách. Rozměrové varianty jsou specifikovány v tabulce. Podvozek je povrchově upraven práškovým lakem.



<b>MINI</b>	105	15 kg	35 kg	58	25	30	102	53	17°-23°	19-33	0°-165°	94	58	43
<b>STANDARD</b>	105	16,5 kg	35 kg	58	28	34	102	63	17°-23°	19-33	0°-165°	94	58	43
<b>MAXI</b>	108	17,5 kg	50 kg	62	36	37	104	71	17°-23°	22-38	0°-155°	94	62	43
<b>SUPERMAXI 42</b>	108	21 kg	75 kg	68	36	40	104	71	17°-23°	22-38	0°-153°	94	68	43
<b>SUPERMAXI 45</b>	108	22 kg	75 kg	69	43	45	120	84	17°-23°	28-45	0°-155°	95	76	44

## ZDRAVOTNÍ KOČÁREK CORZO – 30, 34

kód ZP

5003223

částečně hrazeno



## ZDRAVOTNÍ KOČÁREK CORZO – 38, 42

kód ZP

5003224

částečně hrazeno



Kočárek určený pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jeho největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, velká variabilita, značná nosnost (až 75 kg) a výjimečně dobrá složitelnost. Je předurčen pro snadné cestování i v prostředcích hromadné přepravy osob. Navzdory snadnému skládání si zachovává základní vlastnosti standardních reha kočárků. Kočárek je dodáván ve čtyřech velikostech označených čísly 30, 34, 38 a 42. Technická specifikace jednotlivých typů je uvedena v tabulce.

V základním provedení má kočárek nastavitelnou hloubku sedačky, nastavitelnou výšku opěry zad a výšku rukojetí. Podnožka je plynule výškově nastavitelná a nastavit lze i tuhost sedáku. Součástí standardního vybavení je také 5 bodový fixační pás. Aktuální vzorník barevnosti látek potahů a rámu Vám rádi zašleme. Z volitelného příslušenství lze ke kočárku CORZO dodat zvyšovač zad, opěrkou hlavy, boční opěrkou, fixační vestu, nožní poutací pás atd. Aktuální seznam doplňkového vybavení a příslušenství najdete na našich webových stránkách.

<b>BCX 30</b>	101-112	12,5 kg	45 kg	53	30	26-34	98	54-63	17°	24-37	106°-111°	
<b>BCX 34</b>	98-108	13 kg	55 kg	58	34	30-37	103	58-67	22°	28-45	110°-114°	
<b>BCX 38</b>	102-118	14 kg	75 kg	63	38	32-39	115	67-93	21°	29-47	110°-114°	
<b>BCX 42</b>	112-132	14,7 kg	75 kg	65	42	32-40	115	67-93	19°	33-50	108°-112°	





# BERLE A CHODÍTKA

Berle a chodítka slouží k odlehčení zátěže dolních končetin případně ke zvýšení stability uživatele. Použití standardních francouzských berlí vyžaduje dostatečnou sílu v předloktí i v úchopu. Částečně, tento požadavek omezuje použití podpažní berle nebo chodítka. Chodítka a zejména pak reverzní chodítka jsou vhodná i pro děti již od tří let věku jako chodítka pro nácvik chůze a rehabilitaci.

Dětská chodítka slouží k posílení svalových partií u dětí s postižením, vrozenými nebo růstovými vadami dolních končetin. Při pórůzové rehabilitaci umožní chodítka dítěti opět získat pocit stability.



## DĚTSKÁ FRANCOUZSKÁ FUN-KIDS kód ZP

5003521

částečně hrazeno



GER  
CHI  
NEU  
ORP  
ORT  
PRL  
REH  
REV  
SLO

Francouzská berle vhodná pro děti již od cca 4 let věku. Berle je výškově stavitelná – oporu ruky lze nastavit v rozsahu 50-72 cm od země. Nastavit lze též délku předloketní opory v rozmezí 16 - 20,5 cm od rukojetí. Nosnost berle je 50 kg.



## DĚTSKÁ FRANCOUZSKÁ FDD 91 kód ZP

5000317

částečně hrazeno



DIA  
GER  
CHI  
INT  
NEU  
ORP  
ORT  
PRL  
REH  
REV  
SLO  
TRA

Lehká dětská berle s pevnou rukojetí a předloketní opěrou. Konstrukčně je uzpůsobena především pro děti či dospělé menšího vzrůstu. Výškově nastavitelná rukojeť v rozsahu 59-84 cm. Nosnost berle je 100 kg.



## DĚTSKÁ FRANCOUZSKÁ QUADRO

nehrazeno

Francouzská berle s čtyřstopou oporou. Berle poskytuje zvýšenou oporu a stabilitu. Čtyřstopý násadec je asymetrický tak, aby se nepletl pod nohy dítěte a umožňuje instalaci na pravou i levou stranu. Půdorys čtyřstopého násadce je 23x35 cm. Berle má výškově stavitelnou rukojeť v rozsahu 65-88 cm od země. Předloketní opora je nastavitelná v rozsahu 16 – 21 cm od madla. Díky čtyřstopé opoře dokáže berle i samostatně stát a pokud není používána není nutné ji pokládat nebo opírat.



## PODPAŽNÍ QUICK'N'EASY DĚTSKÁ

nehrazeno

Podpažní duralová berle určená dětem či osobám malého vzrůstu. Měkčená podpažní opora je výškově stavitelná v rozsahu 83 - 103 cm a úchopové madlo 48 - 70,5 cm. Hmotnost berle je pouze 850 g.



## CHODÍTKO PEVNÉ GO - ON 1

nehrazeno



Pevné chodítko jednoduché a lehké konstrukce. Chodítko je skládací a nohy jsou doplněny protiskluzovými špunty. Madlo je výškově stavitelné. Chodítko dodáváme ve velikosti XS a S, základní rozměry jsou uvedeny níže.

<b>VELIKOST XS</b>	44	54	60,5-69	2,7 kg	100 kg
<b>VELIKOST S</b>	50	54	69-77,5	3 kg	100 kg

## CHODÍTKO DĚTSKÉ FIXI

kód ZP

5004813

plně hrazeno

## CHODÍTKO DĚTSKÉ FOX

kód ZP

5004814

plně hrazeno

CHI  
NEU  
ORP  
ORT  
REH



Čtyřkolové skládací duralové chodítko pro děti. Chodítko je vybaveno brzdami s funkcí parkovací brzdy. Výška opěrného madla je stavitelná. Chodítko dodáváme ve dvou velikostech, v provedení FIXI a FOX. Ve velikosti FOX je chodítko doplněno sedátkem.

<b>FIXI</b>	62,5	60-69	57,5	20	100 kg	5,2 kg	-	50	15-23
<b>FOX</b>	67	69-77,5	57,5	20	100 kg	5,5 kg	22,5	50	23-32

## CHODÍTKO DĚTSKÉ FIXI YANO

nehrazeno

## CHODÍTKO DĚTSKÉ FOX YANO

nehrazeno



Chodítko s nastavitelnou předloketní oporou YANO. Chodítko je čtyřkolové, skládací. Velmi lehká duralová konstrukce a plná kola zajišťují minimální valivý odpor a snadné ovládání. Předloketní opora YANO je úhlově nastavitelná a je možno ji i natočit do stran a případně doplnit fixací předloktí. Polohu úchopového prvku lze důmyslně nastavit a při objednání lze zvolit ze tří tvarů tohoto úchopového madla. Madla jsou doplněna pákami brzd. Tyto brzdy lze použít nejen jako parkovací, ale také jako dopomoc při otáčení.

Chodítko dodáváme ve dvou velikostech, v provedení FIXI a FOX.

<b>FIXI YANO</b>	68	60-69	59	20	100 kg	7,6 kg	91-100
<b>FOX YANO</b>	68	69-77,5	59	20	100 kg	7,6 kg	100-108





# BERLE A CHODÍTKA

## GRILLO

nehrazeno



Chodítko Grillo je navrženo pro usnadnění pohybu a nácvik chůze osob se sníženou pohyblivostí. Schopnost samostatného pohybu ve vlastním prostředí má navíc zásadní význam pro rozvoj soběstačnosti, sociálních dovedností a mezilidských vztahů. Jedná se o variabilní chodítko s lehkým hliníkovým rámem, u kterého lze díky plynovým pružinám plynule nastavit oporu do požadované výšky. Chodítko je vyráběno a dodáváno ve 4 velikostech dle velikosti uživatele – Mini, S, M a L. Je tak vhodné od nejmenších dětí, které se s dovedností chůze teprve seznamují, až po dospělé uživatele.

Chodítko Grillo je možné objednat/nastavit ve variantě přední rám či zadní rám. Chodítko s předním rámem je vhodné pro uživatele vyžadující větší oporu/jistotu při chůzi. V této variantě je rám chodítka před uživatelem. U varianty se zadním rámem je pak rám za uživatelem a ten má pak před sebou volný prostor. Díky variabilitě a možnostem nastavení příslušenství lze chodítko zcela přizpůsobit individuálním potřebám daného uživatele. Součástí chodítka je nastavitelná polstrovaná pánevní opora s ergonomickým postrojem. Ergonomický postroj s abdukčním efektem v případě potřeby poskytuje uživateli oporu a může odlehčit dolní končetiny bez vytváření genitálního nebo tříselného tlaku. Postroj je vyroben tak, aby zajistil maximální pohodlí a bezpečnost, je nastavitelný a odnímatelný, lze jej prát v pračce.

V rámci příslušenství lze chodítko doplnit o hrudní oporu, případně i o hlavovou opěrku, pro výraznější fixaci postroje. Pro správné vedení dolních končetin lze chodítko vybavit abdukčním klínem či lýtkovým postrojem na vodící liště. Oporu horních končetin lze pak též přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Nastavitelné podpěry (například pánevní, hrudní) jsou opatřeny značkami, které umožňují lékaři nebo terapeutovi nastavit nebo obnovit určitou polohu po složení rámu nebo použití jiným uživatelem. To usnadňuje nastavení chodítka a zamezuje riziku nevhodného nastavení. Všechna uživatelská nastavení lze měnit bez potřeby použití nářadí.

Zadní kola chodítka jsou pevná a jsou opatřena parkovací brzdou, reverzní brzdou a přibrzdňovacím mechanismem s 5 úrovněmi nastavení. Reverzní brzda zabraňuje zpětnému chodu chodítka (chodítko se pohybuje jen ve směru vpřed). Přibrzdňovací mechanismus je vhodný pro utlumení snadnosti ovládnutí chodítka u uživatele s nekontrolovatelnými pohyby. Přední kola jsou otočná s možností aretace.

Chodítko Grillo je vhodné pro interiérové i venkovní použití a lze jej složit jedním pohybem do kompaktní podoby pro skladování a snadnou přepravu.

▶ VIDEO



MINI	74,5	42-61	62	35 kg	15 kg	75-100
S	75	49-84	69	45 kg	18,5 kg	90-135
M	91	54-100	76	90 kg	21,7 kg	110-165
L	111	63-120	80	110 kg	28,5 kg	150-190





# ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO





# BERLE A CHODÍTKA

## REVERSNÍ DĚTSKÉ CHODÍTKO PLUTO velikost 1

kód ZP

5004815

částečně hrazeno



## REVERSNÍ DĚTSKÉ CHODÍTKO PLUTO velikost 2

kód ZP

5004816

částečně hrazeno



CHI  
NEU  
ORP  
ORT  
REH



Reversní chodítko Pluto slouží k nácvičení chůze a zároveň dítěti poskytne velmi dobrou oporu. Automatické brzdy na kolech zabraňují nežádoucímu zpětnému pohybu. Chodítko Pluto dodáváme ve dvou velikostech.

Chodítko lze doplnit sedlem nebo postrojem.

VELIKOST 1	75	42-72,5	66	14,5	60 kg	6,2 kg	36-46
VELIKOST 2	80	50-80,5	68	14,5	80 kg	6,6 kg	36-46

## Nastavitelné SEDLO

nehrazeno



Pro zvýšení opory a stabilizace dítěte při nácvičení chůze je možno chodítko PLUTO doplnit o cyklistické sedlo. Sedlo je v přední části velmi úzké a umožňuje tak velkou volnost pohybu nohou. Sedlo je na držáku výškově, stranově i úhlově nastavitelné.

Držák pro sedlo se vyrábí ve dvou velikostech. Pro chodítko PLUTO o velikosti 1 nebo 2.

## POSTROJ K CHODÍTKU PLUTO

nehrazeno



Postroj - kalhotky, lze doplnit na reversní chodítko PLUTO. Stejně jako sedlo poskytuje tento postroj dítěti dodatečnou oporu a odlehčení dolních končetin. Protože se však, na rozdíl od sedla, jedná o volnou oporu, umožňuje dítěti trénovat stabilitu. Postroj je všestranně nastavitelný a jak je patrné na obrázku níže lze jej na chodítko instalovat rozličným způsobem.

Postroj je dodáván ve dvou velikostech dle velikosti chodítka PLUTO.






Toaletní vozíky slouží k vykonávání tělesné potřeby mimo prostor toalety. Poskytují dítěti více opory a usnadňují péči rodiče nebo zdravotnického personálu. Sprchovací vozíky umožní zajet s dítětem do sprchového koutu a provést osobní hygienu přímo ve vozíku. Niž uvedené produkty kombinují obě funkce v jednom produktu. Tento sortiment zdravotnických prostředků není hrazen zdravotními pojišťovnami.

## TOALETNÍ A SPRCHOVACÍ VOZÍK AUGSBURG

nehrazeno



Toaletní a sprchovací vozík s šíří sedu 40 cm. Postranice vozíku jsou odklopitelné a umožňují, pokud je to nezbytné, instalaci dodatečné fixace. Kola vozíku mají průměr 75 mm a jsou doplněna nášlapnými brzdami. Sedák je měkčený s měkčeným krytem toaletní nádoby. Hygienický výřez rámu usnadňuje provádění hygieny intimních partií. S vozíkem lze, po odejmutí nádoby, nadjet nad toaletní mísu. Pokud je výška toaletní mísy větší než 40 cm, je potřeba objednat vozík s většími koly. Lze tak nadjet nad mísu až o výšce 44 cm a zvýší se tím i výška sedu. Vozík je vyrobený z velmi odolných plastů, duralu s nerezovými konstrukčními prvky. Vozík Augsburg lze doplnit o opěrku hlavy, polstrování područek a bezpečnostní pás.

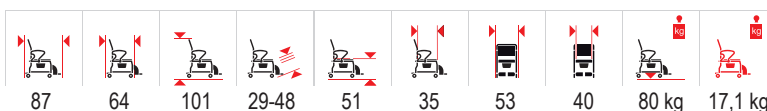


## AUGSBURG S VELKÝMI KOLY

nehrazeno



Toaletní a sprchovací vozík Augsburg lze dodat také s koly o velikosti 24". Kola jsou doplněna poháněcími obručemi, která umožní dítěti samostatný pohyb. Díky velkým kolům, na které je možno vozík částečně naklopit, je také snadnější překonávání prahů a jiných nerovností. S vozíkem lze i s těmito koly nadjet nad běžné WC o maximální výšce 44 cm.

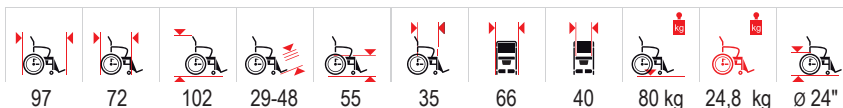

## VANOVÝ ZVEDÁK KANJO


kód ZP

5004350

plně hrazeno



Vanový zvedák Vám umožní bezpečnou koupel Vašeho dítěte, pokud jej již není snadné do vany vložit a zejména následně z vany vyzdvihnout. Vanový zvedák Kanjo umožní pohodlné nasednutí v úrovni horního okraje vany a následné spuštění na dno vany (nejnižší poloha je méně než 7 cm nad dnem vany). V dolní poloze se pak ještě může zádová opěrka zaklonit v úhlu až 40°. Po koupeli Vaše dítě vyzvedne bateriově poháněný motor zvedáku opět na úroveň horního okraje vany. Vanový zvedák Kanjo je poháněn baterií. Elektronika v dálkovém ovladači Vám nedovolí spuštění zvedáku na dno vany v případě, že je již baterie natolik vybitá, že by nedokázala zvedák vyzdvihnout nahoru. V takovém případě signalizuje výrazný ukazatel na dálkovém ovladači potřebu nabíjení. Nabíjení probíhá mimo vanu – stačí pouze odpojit ovladač a připojit jej na nabíječku (jako mobilní telefon). Vanový zvedák je na dně vany bezpečně upevněn pomocí velkoplošných přísavek. Vanový zvedák má celkovou hmotnost 10,8 kg. Pro snadnější instalaci jej lze rozdělit na dva díly. Celková nosnost vanového zvedáku je 140 kg.

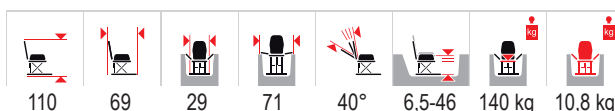





## SHARKY

nehrazeno



Sharky je všestranný sprchovací a toaletní vozík pro děti ve dvou velikostech. Vozík se skládá z hliníkové konstrukce Mobility base s komponenty z nerezové oceli a sedačky s PU polstrem v modré barvě. Sedačka je ze základny snadno odnímatelná bez nutnosti použití nářadí. Navíc je možné za použití adaptérů dodávaných jako příslušenství použít tuto sedačku pro instalaci ve vaně či na toaletní míse. Sedačku lze též opatřit stolkem a vozík použít jako jídelní stoličku.

Sedačka je polohovatelná při zachování úhlu sedu (poloha relax) v rozsahu  $-10^{\circ}$  až  $45^{\circ}$ . Šířka sedačky lze zvolit z 6 možností od 24 do 35 cm. Hloubka sedačky je plynule nastavitelná. Sedačka je opatřena hygienickým výřezem s vyndavací zadní vložkou pro snazší provedení hygieny a toaletní nádobou, kterou lze vysunout směrem vzad. Výšku sedu lze nastavit ve 4 krocích v rozsahu 52 - 61 cm. Zádová opěrka je polohovatelná v rozsahu  $72^{\circ}$  až  $120^{\circ}$  a je jí možné zcela odejmout pro větší kompaktnost při skladování či transportu.

Součástí je úhlově nastavitelná odnímatelná stupačka s úhlově a výškově nastavitelnou jednodílnou nášlapnou plochou. Všechna 4 kola o velikosti 75 mm jsou opatřena parkovací brzdou. Nosnost sedačky je 60 kg. Celou sedačku včetně podvozku lze snadno složit do kompaktní podoby bez použití nářadí a je možné ji přizpůsobit požadavkům Vašeho dítěte díky celé škále příslušenství.

▶ VIDEO



<b>VELIKOST 1</b>	70	94	22-40	78°-138°	72°-120°	-10°-+45°	52-61	27-36	56	24-30	60 kg	19,5 kg*
<b>VELIKOST 2</b>	70	104	22-40	78°-138°	72°-120°	-10°-+45°	52-61	27-40	56	29-35	60 kg	20,5 kg*


\*Hmotnost vč. příslušenství

## LEHÁTKO DĚTSKÉ REPO

nehrazeno



Víceúčelové lehátko určené zejména pro koupání dětí ve vaně. Konstrukce je z polypropylenových trubek. Potah je s opěrkou hlavy a s popruhy pro zafixování neklidného dítěte. Samostatně lze polohovat zádovou a nožní část lehátka.  
Rozměry: základna lehátka 37 x 69 cm, výška opěradla 60 cm, délka sedací části 30 cm. Nosnost 35 kg, hmotnost 3 kg.

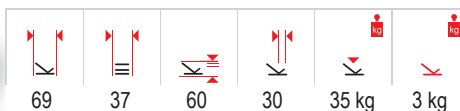

## MOBILNÍ KOUPACÍ VANA M-TUB DĚTSKÁ

nehrazeno

Mobilní koupací vana M-tub je určena k provádění hygieny na lůžku. Vana má nafukovací okraje, které vytvoří dočasný prostor pro koupání. Vana je vyrobena z odolné, antialergické, gumové textilie s atestem zdravotní nezávadnosti a je uzpůsobena k tomu, aby ji bylo možno snadno „podvléct“ pod ležícím dítětem a až následně nafouknout. Součástí dodávky je ruční pumpa pro snadné nafouknutí okrajů. Vana není určena k trvalému nafouknutí. Z bezpečnostních důvodů zajišťuje ventil pokles tlaku do 24 hodin. Omytí pacienta je možno provést pomocí žínky nebo sprchy. Vana je primárně určena k průtočnému omývání pacientů, za tímto účelem má odtokový rukáv, kterým odtéká použitá voda. K jejímu zachytávání lze použít 20-ti litrové vědro, které slouží zároveň jako praktická přepravní nádoba. Při přehození odtokového rukávu dovnitř vany lze vanu napustit až do výšky 8 cm. Vana má vnitřní prostor 70x142 cm. Vanu dodáváme také v dospělém (vnějším) rozměru 200x90. Koupací vanu dodáváme samostatně nebo spolu se sprchovou hlavici a 4 metrovou přívodní hadicí. Objednat lze také měkčenou podložku se zvýšeným podhlavníkem.



## PODLOŽKA DO MOBILNÍ KOUPACÍ VANY M-TUB DĚTSKÁ

nehrazeno



Podložka určená do mobilní koupací vany M-tub. Její použití je vhodné zejména pokud používáte mobilní koupací vanu na tvrdém podkladu, například na zemi. Podložka sestává ze čtyř dílů, aby bylo možno ji snadno složit. Díly jsou vyplněné molitanovou pěnou o tloušťce 2 cm, podhlavní díl je tvořen klínem s nejvyšší výškou 8 cm. Podložka je vyrobena ze stejného, odolného materiálu jako koupací vana. Její použití nemusí být omezeno pouze do mobilní vany M-tub.

## SPRCHOVACÍ LŮŽKO NEFTI DĚTSKÉ

nehrazeno



Sprchovací lůžko je určeno pro mytí a převoz imobilních pacientů. Dětská verze tohoto lůžka má rozměr konstrukce ložné plochy 165 x 67 cm. Tato konstrukce je pak je vybavena omyvatelnou vyztuženou matrací z PVC. Matrace je sanitární, snadno udržovatelná, bez ftalátů. Ocelová konstrukce lůžka je opatřena práškovým lakem s antikorozií úpravou, která zaručuje spolehlivost a trvanlivost. Všechna čtyři pojezdová kola o průměru 125 mm jsou vybavena brzdami. Maximální šířka lůžka 72 cm umožňuje snadnou manipulaci i v omezeném prostoru. Pro snadné přemístění pacienta z postele na lůžko a zpět je mycí lůžko vybaveno postranicemi odklopnými o 180°. Lůžko je vybaveno hydraulickým zdvihem (65 - 91cm) mycí plochy, zároveň je mycí plocha lůžka sklopná o 5° pro snadný odtok vody během a po použití. Mycí plocha je opatřena výpustí odtokovou hadicí. Nosnost lůžka je 180 kg včetně použité vody.





# ANTIDEKUBITNÍ PROGRAM

V této kategorii jsou pomůcky sloužící k vytvoření a udržení vhodného sedu pro děti v kočárku, vozíku nebo na sedacím zařízení. Jedná se o pomůcky z řady STABILO a antidekubitní sedáky a zádové opěrky Varilite. K fixaci pak slouží široký sortiment pásů a vest Bodypoint.

## POLOHOVACÍ A STABILIZAČNÍ POLŠTÁŘE STABILO

Jedná se o polštáře a zádové opěrky vyplněné granulátem, který je možno vytvarovat dle potřeby a velmi snadno tak stabilizovat uživatele v kočárku, vozíku nebo i v křesle nebo na židli. Polohovací opěrky Stabilo jsou vyrobeny z neoprenu se zdravotním atestem. Opěrky lze velmi snadno vymodelovat do požadované podoby a pomocí přiložené pumpy z nich vyčerpát vzduch. Tím dojde k zařizování konečného tvaru. Opěrky lze zpevnit zcela do tvrda, aby poskytovaly pevnou oporu, nebo jen částečně tak, aby zůstaly měkké a tvárné. Tvar opěrky lze kdykoliv změnit. Sedáčky a zádové opěrky je možno upevnit do vozíků nebo kočárků pomocí suchých zipů. Opěrky Stabilo mají certifikát Freseniova institutu o vhodnosti k dlouhodobému používání, snadno se udržují a čistí.



Polohovací pomůcky Stabilo, jsou dodávány v následujících tvarových a rozměrových variantách:

## Sedačka BASE

Univerzální sedací polštář. Je vhodný zejména tam, kde se uživatel v sedu sesouvá, nebo je potřeba kompenzovat abnormální zakřivení páteře, ať už v rovině sagitální nebo frontální (skoliózy, hyperlordózy, ...), či deformity pánve. V sedáku je možno například vymodelovat tvar abdukčního klínu.

	Velikost	A	B
	Base S	25 cm	25 cm
	Base S+	35 cm	35 cm
	Base M	40 cm	40 cm
	Base M+	45 cm	45 cm
Base L	50 cm	50 cm	

nehrazeno



## Sedačka BASE HILO

Sedačka obdobné konstrukce jako BASE jen s ještě výraznějším abdukčním hrbolem. Tento abdukční hrbol je v sedačce trvale vytvořen a je možno modelovat jeho tvar. Modelovat lze samozřejmě celou plochu sedáku.

	Velikost	A	B
	Base Hilo S	25 cm	25 cm
	Base Hilo S+	35 cm	35 cm
	Base Hilo M	40 cm	40 cm
	Base Hilo M+	45 cm	45 cm
Base Hilo L	50 cm	50 cm	

nehrazeno



## Sedačka BASE HILO DORO

Sedačka, která má stejně jako BASE HILO zvýrazněný abdukční klín, navíc má ještě boční vedení pro výraznější stabilizaci sedu a fixaci pánve. Sedačku lze individuálně namodelovat po celé ploše včetně bočního vedení. Součástí sedačky je pás na suchý zip.

	Velikost	A	B	C	D
	Base Hilo Doro S	25 cm	30 cm	21 cm	14 cm
	Base Hilo Doro S+	35 cm	35 cm	23 cm	18 cm
	Base Hilo Doro M	40 cm	40 cm	27 cm	20 cm
Base Hilo Doro M+	45 cm	45 cm	30 cm	29 cm	

nehrazeno



## HLAVOVÁ OPĚRKA Stabilo

Univerzální hlavová opěrka, která se přizpůsobí tvaru hlavy. Je možno ji natvarovat asymetricky, zvolit její tvrdost či uzpůsobit ji neobvyklé pozici hlavy. Každá opěrka je vybavena suchými zipy pro uchycení ke kočárku či vozíku.

	Velikost	A	B	C
	Hlavová opěrka Stabilo M	15 cm	30 cm	14 cm
	Hlavová opěrka Stabilo L	20 cm	35 cm	17 cm

nehrazeno






## Sedačka se zády CONFORTABLE PLUS DUO HILO

Sedák se zádovou opěrkou v jednom integrovaném modelu. Část sedáku, podobný modelu BASE umožní vymodelovat tvar sedu i boční oporu. Zádová opěrka, včetně výstupků na boční fixaci umožňuje stabilizovat zádovou opěrku. U modelu DUO, kde je sedák součástí zádové opěrky, není potřeba fixovat jejich vzájemnou polohu.

Tento model je možno použít také jako fixaci při cestování a při použití speciálního kovového skeletu a doplnění o opěrku hlavy také jako plnohodnotnou sedačku do auta. Sedák má vymodelovaný výrazný abdukční hrbol.

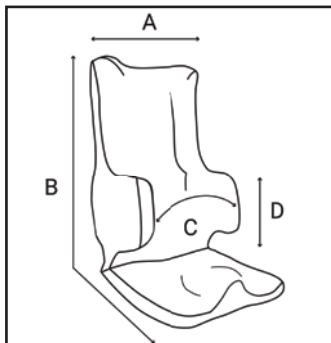


Velikost	A	B	C	D
Comfortable Plus Duo S	30 cm	80 cm	58 cm	28 cm
Comfortable Plus Duo M	39 cm	95 cm	65 cm	28 cm
Comfortable Plus Duo L	40 cm	115 cm	75 cm	35 cm
Comfortable Plus Duo XL	45 cm	120 cm	85 cm	35 cm
Comfortable Plus Duo XXL	50 cm	140 cm	95 cm	35 cm

nehrazeno



## LOKETNÍ OPĚRKA Stábilo

Loketní opěrka určená pro zaplňování a stabilizaci předloktí. Je vhodná zejména pro osoby se spasticitou či kontrakturami v oblasti zápěstí. Součástí opěrky jsou suché zipy pro snadnější uchycení.

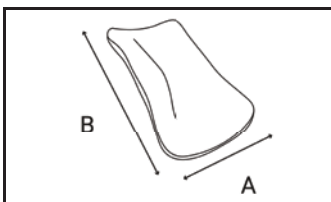

Velikost	A	B
Loketní opěrka M	20 cm	30 cm
Loketní opěrka L	25 cm	45 cm


nehrazeno



## Polohovací matrace GRANDE

Polohovací matrace GRANDE je vhodná tam, kde je potřeba stabilizovat pacienta vleže nebo vsedě. V matraci je možno velmi snadno zaplňovat pacienta bez použití jiných polohovacích pomůcek. Matrace GRANDE je také vhodná pro terapii dětí s různými centrálními neurologickými poruchami v konceptu bazální stimulace, při protahování spastických svalů, nebo pro navození relaxace u neklidných pacientů. Výška matrace je cca 20 cm a je vhodná i proti proleženinám u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko.

Součástí matrace je kompresor pro regulaci množství vzduchu uvnitř matrace a tím její tvrdosti.

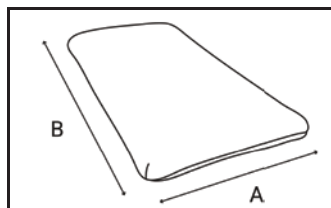

Velikost	A	B
Grande M	70 cm	160 cm
Grande M+	90 cm	200 cm
Grande L	130 cm	200 cm

nehrazeno




## Sedací vak BEANSEAT

nehrazeno

Stábilo BEANSEAT je sedací polohovací vak ve tvaru taburet. Je určen pro polohování pacienta v sedě nebo polosedě. Nabízí možnost individuálního natvarování dle potřeb konkrétního pacienta. Je vhodný pro polohování spastických osob, osob s deformitami páteře a nervosvalovými onemocněními, či pro zklidnění mimovolných pohybů u neurologických pacientů. Polohování v BEANSEAT má nejen pozitivní rehabilitační a relaxační účinky, ale podpora a správné držení těla, které poskytuje, má též vliv na krmení či na práci logopeda.

Součástí vaku je kompresor pro rychlejší nafouknutí a regulaci tvrdosti vaku.

K sedacímu vaku můžeme dodat také pojízdnou základnu o výšce 72 cm.

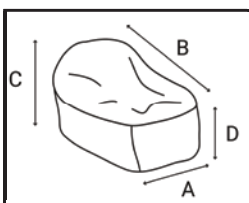

Velikost	A	B	C	D
Stábilo BEANSEA M	60 cm	80 cm	50 cm	40 cm
Stábilo BEANSEA L	70 cm	100 cm	70 cm	50 cm



Stabilizační opěrky Stábilo lze také dodat vyrobené zcela na míru podle Vašich požadavků. Pro cenovou nabídku prosím kontaktujte naše pražské středisko.





# ANTIDEKUBITNÍ PROGRAM

## SEDACÍ SYSTÉM VARILITE JUNIOR

Sedací systém pro děti ve věku od 2 do 6 let. Sedák a zádová opěrka fixuje trup a umožňuje kompenzovat deformity páteře a pánve. Správné sezení je zcela zásadní a obzvláště u dětí je nezbytné jeho správné volbě a nastavení věnovat veškerou péči.

Systém Varilite sestává z pěnového jádra o různé tuhosti rozdělené do anatomických zón. Sedák i zádové opěrky jsou uzavřeny do komory opatřené ventilem k nastavení správné hloubky zanoření a optimálního rozložení zatížení. Sedací systém Vám rádi přijdeme předvést a navrhnout.



## VARILITE EVOLUTION JUNIOR - SEDÁK

kód ZP

5003899

částečně hrazeno

Stejně jako všechny antidekubitní sedáky a sedací systémy Varilite je i tento sedák opatřený ventilem k nastavení požadované výšky a kontur sedáku. Umístění ventilu je však rozdílné, tak aby odolal poškození a nepřekážel.

- Střední symetrická laterální stabilizace sedu
- Základní mediální stabilizace
- Výška sedáku 7,4 cm
- Hmotnost 261g (v rozměru 25x25 cm)
- Rozměr uvádí šířku x hloubku sedáku:

Sedák Varilite Junior 25x25, 25x30, 28x28, 28x33, 30x30 cm



GER

NEU

ORT

PRL

REH

## Zádová opěrka VARILITE Junior MID

kód ZP

5003897

částečně hrazeno

Zádová opěrka určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm. Šíře duralového korpusu je 22 cm a výška 23,5 cm. Polstr se vzduchovou komorou však přesahuje tento rozměr o cca 2,5 cm. Hmotnost zádové opěrky, včetně upevňovacích prvků na vozík je 1,1 kg.



INT

NEU

ORT

PED

REH

## Zádová opěrka VARILITE Junior DEEP

kód ZP

5003898

částečně hrazeno

Zádová opěrka s výrazným bočním vedením určená k instalaci na mechanický vozík o šíři sedu 23 až 28 cm. Boční vedení poskytuje výraznou stabilizaci trupu dítěte. Šíře duralového korpusu je 25 cm a výška 23,5 cm. Polstr se vzduchovou komorou však přesahuje tento rozměr o cca 2,5 cm. Hmotnost zádové opěrky, včetně upevňovacích prvků na vozík je 1,3 kg.



INT

NEU

REH

ORT

PED



Fixační pásy slouží ke stabilizaci, opoře nebo zvýšení bezpečnosti dítěte ve vozíku, kočárku případně kdekoli jinde, kde dítě tráví svůj čas.

Pásy a fixační prvky doporučujeme vždy navrhnut ve spolupráci s lékařem nebo fyzioterapeutem. Niže je uvedeno jen několik málo těchto produktů. V naší nabídce jich máme opravdu mnoho a řadu z nich lze objednat na míru dle použití, velikosti a možnosti upevnění na konkrétní zdravotnický prostředek. Pásy také vyrábíme na míru dle konkrétních potřeb pacienta. Pro širší nabídku se prosím podívejte na náš web a nebo nás kontaktujte.



## NEOPRENOVÝ FIXAČNÍ PÁS



Fixační pás z neoprenu o délce 150 cm. Po celé délce pásu je měkká strana suchého zipu a délku pásu je tak možno nastavit zcela libovolně. Neopren je měkký a částečně pružný, čímž je umožněno nastavit tlak fixačního popruhu. Pásem lze fixovat hrudník, břicho nebo i například zajistit stehna nebo bérce.

Má snadno uchopitelný konec s otvorem pro palec pro uživatele se zhoršenou jemnou motorikou.

Pás dodáváme ve třech provedeních dle šíře pásu:

Velikost S - šíře 7,5 cm

Velikost L - šíře 11,5 cm

Velikost XL - šíře 15,5 cm



nehrazeno

## HRUDNÍ PÁS MONOFLEX



Fixační pás Monoflex je určen uživatelům, kteří potřebují silnou, ale pohodlnou oporu v oblasti hrudníku. Pás je možno využít též k fixaci v oblasti břicha či dolních končetin. Elastické polstrování s vysokou pevností zajišťuje pevnou oporu v oblasti trupu a zároveň pohodlí díky své roztažnosti. Pás je vybaven dvěma sponami s otočným středem umístěnými po stranách pásu.

Monoflex zajišťuje stabilitu trupu a zároveň, na rozdíl od fixačních vest, zachovává volný pohyb ramenních kloubů. Je vhodný pro uživatele s nestabilitou v oblasti trupu, s neurodegenerativními onemocněními, s dýchacími obtížemi, dysfagií, dysfázií a pro osoby se skoliotickým postavením páteře. Je možné jej též použít k fixaci dolních končetin u uživatelů s extenčními spazmy. Bezpečnostní pás dodáváme v řadě velikostí. Více informací najdete na našich webových stránkách.

nehrazeno

## FIXAČNÍ VESTA STAYFLEX



Fixační vesta Stayflex je určena uživatelům s potřebou výrazné fixace v oblasti hrudníku. Poskytuje pevnou oporu hrudníku, aniž by byl obětován pohodlný pohyb ramen. Patentované dvouzónové elastické provedení vesty prakticky eliminuje její posun směrem nahoru při naklonění uživatele vpřed. Vesta je opatřena otočnými sponami na dolních popruzích.

Vyjma velikosti XS lze vestu Stayflex dodat také se zipem v oblasti hrudní kosti.

Fixační vestu dodáváme v řadě velikostí. Podle rámu vozíku lze zvolit tu nejvhodnější fixaci. Více informací najdete na našich webových stránkách.

nehrazeno

## FIXACE KOTNÍKU



Fixace kotníků firmy Bodypoint je komfortní a dynamickou alternativou k pevným fixacím nohou. Patentovaný tvar zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku po celém kotníku. Popruhy jsou opatřeny výztuhou z vysoce pevného polyuretanu, který zajišťuje jejich pevnost.

Fixace je určena k připevnění na nášlapné plochy stupaček elektrických či mechanických vozíků. Pomocí popruhů lze nastavit optimální utažení kolem kotníků a pro snadné odepnutí je fixace opatřena batohovou sponou. Dodáváme v páru a vhodnou velikost, dle obvodu bérce, vyberete na našich webových stránkách.

nehrazeno





## POMŮCKY DENNÍ POTŘEBY

V našem sortimentu máme řadu drobných, ale užitečných pomůcek pro usnadnění běžných denních činností od oblékání po osobní hygienu. Většina z těchto pomůcek je určena seniorům. Máme však i takové, které jsou určeny primárně pro děti. Níže jich několik vybíráme.

### DRŽÁK NA KNIHU S DRŽÁKEM STRÁNKY



Držák na knihu fixuje časopis nebo knihu v poloze příjemné pro čtení a zároveň přidržuje listy tak, aby se samovolně neobracely. Může být postaven na stůl či položen přes kolena uživatele. Ve složeném stavu je plochý o rozměru 300 x 240 x 45 mm. Hmotnost 358 g.



nehrazeno

### DRŽÁK NA TUŽKU, 3 KS



Měkké, umělohmotné, vypouklé tvarované držáky na tužku lze navléci na jakoukoli standardní propisku či tužku. Větší úchop zajistí lepší pohodlí a ovladatelnost pera při psaní.

nehrazeno

### NŮŽKY S OPOROU O DESKU



Samootvírací nůžky pro děti jsou určeny pro osoby s nízkou svalovou silou, se spasticitou, třesem horních končetin či jinak narušeným úchopovým mechanismem. Nůžky je možné položit na stůl či jinou pevnou desku a pro stříhání vyžadují pouze zmáčknutí rukojeti, tvarované do písmene T. Pro zmáčknutí rukojetě není třeba velké fyzické síly. Po uvolnění tlaku skrytá pružina nůžky automaticky otevře. Nůžky je možné při stříhání posouvat po stole ve směru stříhu nebo za použití protiskluzné podložky papír posouvat směrem k ostří nůžek. Nůžky jsou opatřeny vysoce kvalitním nerezovým ostřím v délce 45 mm. Součástí balení je chránič ostří a praktické pouzdro na zip pro snadné skladování.

nehrazeno

### PŘÍBOR SE ZESÍLENOU RUKOJETÍ – LŽÍCE



Lžice se zesíleným madlem pro snazší úchop. Materiál rukojeti umožňuje bezproblémové použití příborů i při mokřích či mastných rukou. Ohýbatelná část umožňuje ohnout příbor (jednou) do vhodné polohy. Tím je příbor možno přizpůsobit osobám, které trpí například svalovou slabostí. Celková délka 21 cm, hmotnost 106 gramů.

nehrazeno

### TALÍŘ SE ZARÁŽKOU



Keramický talíř s příkrým okrajem a zarážkou. Osobám, které používají pouze jednu ruku usnadní zarážka nabírání jídla na lžici nebo vidličku.



nehrazeno



## OPORA HLAVY BATH BAGEL

nehrazeno



Opora hlavy slouží ke stabilizaci osoby při koupání ve vaně nebo v bazénu. Límec je možno tvarovat a pomocí pumpy vakuově stabilizovat tvar. Protože je díky náplni tento límec lehký a plave, jeho využití je časté při koupání. Součástí jsou dva popruhy se suchým zipem a pumpa.

## NÁVLEK NA SÁDRU - DĚTSKÝ

nehrazeno



Návlek na sádku nebo obvaz je určen pro usnadnění hygieny. Lze jej snadno navléknout jednou rukou a zabránit tak namočení sádkové dlahy například při sprchování. Díky velmi elastické membráně v ústí rukávce je návlek dokonale těsný i při opakovaném použití. Návlek dodáváme ve dvou provedeních – pro horní a pro dolní končetinu.



# POMŮCKY PRO PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR



## SCHODOLEZ LG2004 L

nehrazeno

Možný příspěvek od ÚP



K přepravě osoby včetně vozíku po schodišti slouží schodolez. Schodolez je přepravní zařízení s pásy uzpůsobenými pro jízdu po schodišti, ke kterému se připe, za zádovou opěrkou, mechanický vozík. U dětských vozíků, které mohou mít malé rozměry, nebo pro přepravu osob v kočárku, případně na elektrickém vozíku není možno tento způsob fixace použít. Je proto potřeba zvolit vhodný model schodolezu. Například zde uvedený model s ližinami. U elektrických vozíků, které jsou těžké, je potřeba zvolit model schodolezu s vyšší nosností. Rádi Vám schodolez předvedeme a navrhneme nejvhodnější řešení. Protože schodolez patří mezi pomůcky, na které na základě zákona 329/2011 Sb. může přispět Úřad práce, zpracujeme Vám i podklady pro žádost o příspěvek. Schodolez lze využít pro přepravu po přímých i vícetahových schodištích. Nelze jej však použít na točitém schodišti.





Ceny uvedené v tomto ceníku jsou platné pouze v tom případě, že jsou shodné s cenami, uvedenými v momentálně platném číselníku VZP. Pokud se tyto ceny liší, platí ceny dle číselníku VZP. Ceny pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (není u nich uveden objednávací kód) jsou platné až do vydání nového ceníku.



POKUD ZDE NENÍ CENÍK NAŠEHO  
SORTIMENTU, ZAVOLEJTE SI  
O NĚJ, PROSÍM  
NA TEL. 266 313 652

OBRATEM VÁM JEJ ZAŠLEME



**CENÍK**





## PRAHA

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, Libeň  
tel.: 266 313 652 fax: 266 313 652 linka 11  
e-mail: ortoservis@ortoservis.cz



Po-Pá 8:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Po telefonické konzultaci i mimo tuto dobu.

Dostanete se k nám metrem trasy B ze stanice Palmovka, výstupem k ulici Na Hrázi a odtud doprava cca 150 m.



## BRNO

Minská 100  
616 00 Brno, Žabovřesky



tel./fax: 541 240 393  
e-mail: brno@ortoservis.cz

Po-Pá: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 16:30



## ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608  
370 04 České Budějovice



tel./fax: 387 432 502  
e-mail: cb@ortoservis.cz

Po-Pá: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00



## OPAVA

Pivovarská 7/71  
746 01 Opava



tel./fax: 553 775 226  
e-mail: opava@ortoservis.cz

Po-Pá: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

## CO JEŠTĚ UMÍME

**Nabídka námi dodávaných zdravotnických prostředků, pomůcek a služeb pro tělesně postižené a seniory je velmi široká. Zavolejte nám, nebo si napište o náš hlavní katalog. Najdete v něm:**

- Mechanické vozíky pro děti, aktivní uživatele i těžce tělesně postižené.
- Elektrické vozíky pro dospělé i barietrické pacienty.
- Široký sortiment pomůcek do koupelny a na toaletu.
- Zvedáky a pečovatelská lůžka.
- Mnoho drobných pomůcek do domácnosti pro seniory a handicapované.
- Řadu pomůcek lze vypůjčit v naší půjčovně.
- Navrhujeme a instalujeme schodišťové sedačky.
- Naši zástupci navrhnou vhodnou pomůcku přímo pro Vás a pokud bude potřeba provedeme i individuální úpravu podle Vašich potřeb a požadavků.
- Na vše co dodáváme poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Obráťte se na nás, rádi Vám poradíme.**

